


Cavios®



Luce base di polymerizzazione per cavità

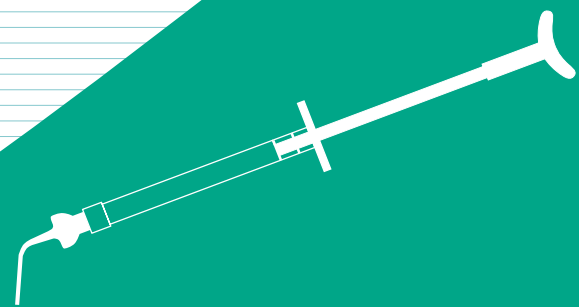

Vantaggi:

*Cavios è un rivestimento composto di fotopolimerizzazione e materiale de base contenente uretano dimetacrilato ed un fosfato tricalcico-(α -TCP)

* α -TCP presenta un'eccellente compatibilità con i tessuti duri.

*Un'applicazione veloce e semplice.

* Una comoda siringa consente di eseguire un rivestimento diretto; non è richiesto nessun strumento.

* La pasta premiscelata presenta proprietà di manipolazione ottimali.

* Non sono necessari mordenzanti.

* Presenta eccellente radiopacità.



Dati Tecnici

TEMPO DI POLIMERIZZAZIONE	20 secondi
PROFONDITA' DI POLIMERIZZAZIONE	2.5 mm
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	50 MPa
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	165 MPa

Fatto da
Neo Dental Chemical Prod., Co Ltd.
Tokyo, Japan



Neo Dental International Inc.

2505 S. 320th ST Suite 625
Federal Way, WA 98003, USA

Tel: +1 253 946 0814
Fax: +1 253 946 0885
www.neodental-intl.com
ndi@neodental-intl.com

Istruzioni

1. Dopo aver preparato la carie, risciacquarla ed asciugarla.
2. In caso d'esposizione della polpa, è necessario applicare una base protettiva a base d'Idrossido di calcio.
3. Allegare un punta monouso.
4. Ricoprire direttamente la base della carie con Cavios.
5. Fotopolimerizzare per 20 secondi. Se l'area da trattare è ampia, aumentare il tempo di polimerizzazione.
6. Se la carie è profonda, ricoprirla circa ogni 0.5 mm, utilizzando tecnica di stratificazione.
7. Se Cavios viene posto sotto una protesi provvisoria a base di resina (Evadyne), utilizzare Sepalite per evitare l'incollaggio tra Cavios (il liner) ed Evadyne. Sepalite assicura che si possa rimuovere Evadyne senza correre il rischio di danneggiare il liner.
8. Al termine dell'applicazione gettare il puntale e chiudere la siringa con il tappo.

Attenzione


- * Non utilizzare Cavios su pazienti che soffrono di allergie o irritazione al Cavios o ai metacrilati. In caso d'irritazione, sospendere il trattamento e consultare un medico.
- * Cavios non deve entrare in contatto con i tessuti molli della bocca, della pelle o degli occhi. In caso di contatto, risciacquare immediatamente con acqua o soluzione salina e consultare un medico.
- * Utilizzare Cavios rispettandone le indicazioni d'uso.

Conservazione

- * Evitare la luce diretta del sole.
- * Per estenderne la durata di conservazione, mantenere Cavios in un luogo fresco.

Imballaggio

Siringa di 1.8g + 15 puntali

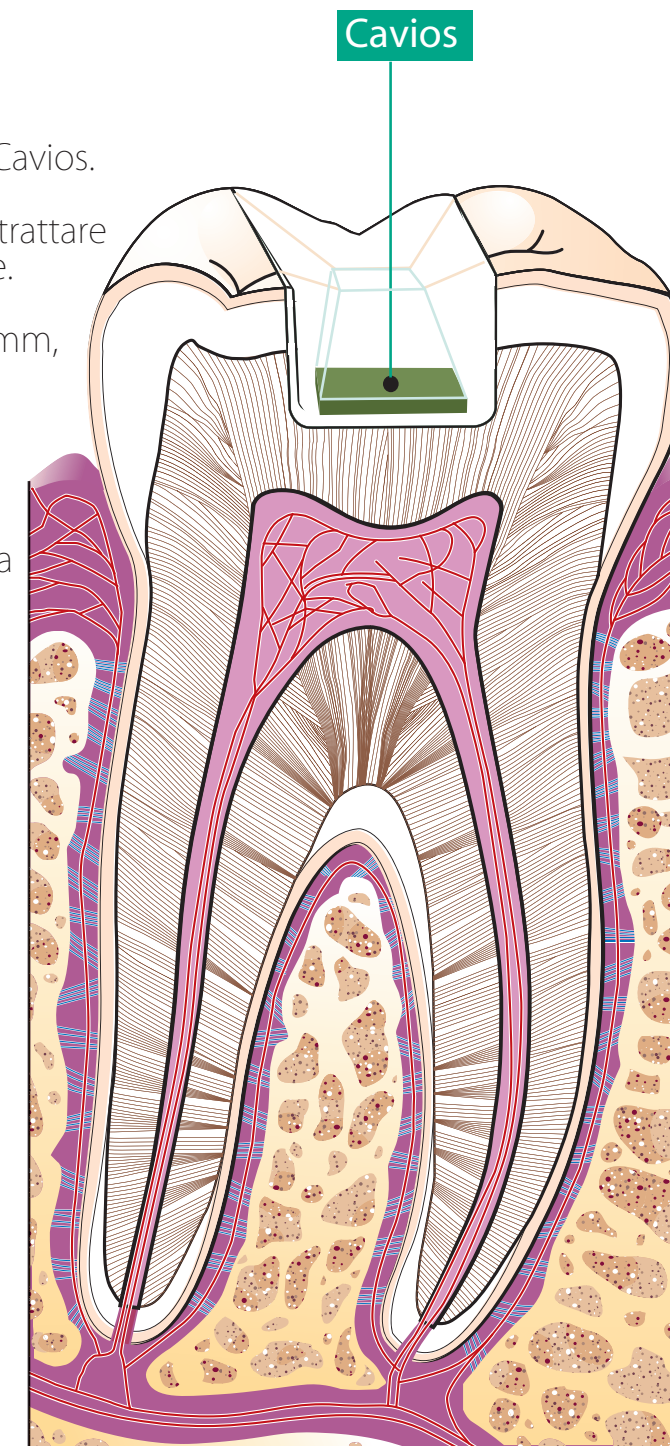

Distribuito da

Neo Dental International, Inc. USA.